

# Gymna ShockMaster

---

Больше чем только ударно-волновая терапия



**gymna**<sup>®</sup>

[gymna.com](http://gymna.com)

# Gymna ShockMaster

## Максимальный результат за минимальное время

Радиальная ударно-волновая терапия - идеальный метод лечения острых и хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата.

### Принцип работы




Механическая генерация ударных волн, которые распространяются радиально в тканях и поглощаются в области лечения

### Результат

- Снижение боли
- Регенерация повреждённых тканей
- Разрушение кальцификатов и фиброзов

### Дополнительные преимущества для вашей практики

- В среднем 6 - 8 сеансов на курс лечения
- Реальная альтернатива хирургии

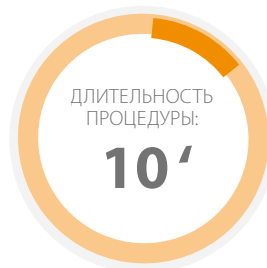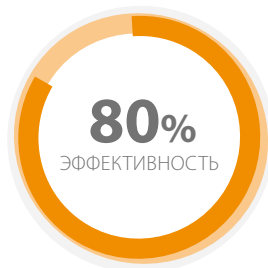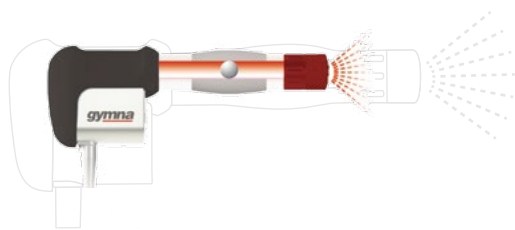

# Gymna ShockMaster

## Основные показания

### Эффективность Gymna ShockMaster в лечении:



#### **Хроническая тендинопатия и энтезопатии:**

эпикондилляргия, надколенниковая тендинопатия, подошвенная фасциопатия, тендинопатия в области вращательной манжеты (с или без кальцификатов) и др.



#### **Спортивные показания:**

тендинопатия сухожилий подколенных мышц в проксимальном отделе, сухожилий приводящих и малоберцовой мышц, медиальный большеберцовый стресс синдром, колено прыгуна, болезнь Осгуд-Шлаттера и др.



#### **Миофасциальный болевой синдром:**

люмбаго, цервикалгия, триггерные точки, головная боль напряжения и др.



#### **Мышечные заболевания:**

мышечная боль, гипертония, спазмы, судороги, мышечная контрактура, фиброз и др.

**Также:** контрактура Дюпюитрена, болезнь Лиддерхозе, акупунктурные точки, метатарзалгия


# Гимна ShockMaster 500

## Лечение в наилучших условиях


Идеальная поддержка для вашей практики с превосходным интерфейсом

### Удобный для врача

- 2 выходных канала для простого и быстрого переключения между аппликаторами
- Бесшумный и безвибрационный масляный компрессор
- Легко закрывающийся инструментальный отсек
- Быстрое обновление программного обеспечения через порт USB

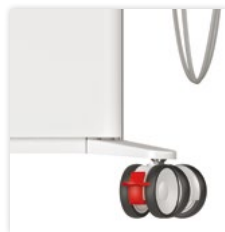

Легкое перемещение инструментальной тележки.

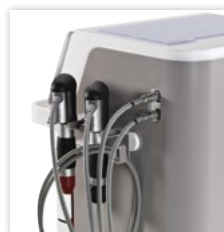

Практичная система держателя кабеля и аппликаторов



Оптимальное расположение принадлежностей благодаря функциональному органайзеру

### Всегда в курсе событий


Ударно-волновая терапия постоянно эволюционирует. Благодаря обновлению программного обеспечения, вы остаётесь в курсе новых методик лечения:

- Параметры лечения адаптированы к новым способам лечения
- Добавлены новые показания, а также протоколы лечения


### Дополнительные функции:

- Наглядные фото процедур лечения
- Анатомическая библиотека
- Медицинская информация о показаниях лечения ударными волнами

Всё это предусмотрено в самом доступном и эффективном виде.

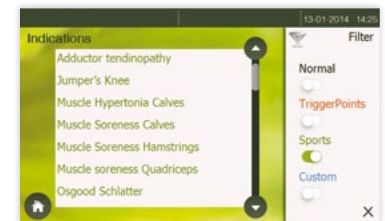

Обновленный перечень показаний на базе научно-обоснованных исследований.

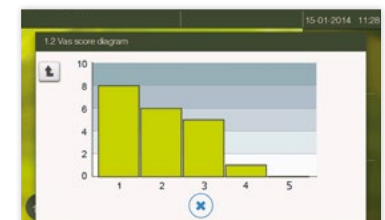

База данных пациентов с программой интерпретации результатов лечения



Визуальная индикация терапевтической зоны с болевым синдромом в лечении триггерных точек

# Гимна ShockMaster 300

**Радиальная ударно-волновая терапия - в любое время, везде.**

*Компактный размер для большой мобильности*

## Мобильный

- Компактный и легкий
- Легкая транспортировка благодаря удобной сумке-кофру.
- Бесшумный встроенный воздушный компрессор, простой в обслуживании.

## Удобный

- Подключите и работайте
- Большие кнопки управления
- Чёткая индикация времени процедуры на цветном экране



*Управлением аппаратом непосредственно в переносной сумке-кофре.*



# Gymna ShockMaster

## Ударно-волновая терапия, адаптированная к пациенту и патологии

1

**Лечение поражённого участка правильно выбранной головкой**



2

**D-ACTOR :**

- Релаксация мышечного напряжения
- Улучшение кровообращения
- Лечение триггерных точек










3

**V-ACTOR**

- Стимуляция метаболической активности и выведение токсинов
- Мышечная релаксация
- Улучшение микроциркуляции



15 мм Стандартная головка		Тендинопатии и кальцификаты вплоть до 40 мм глубиной
15 мм Фокусирующая головка		Болезненные поверхностные зоны, лицевые мышцы, шея и голова.
6 мм Акупунктурная головка		Акупрессура
15 мм Головка глубокого воздействия		Тендинопатии и кальцификаты до 60 мм глубиной
20 мм D-ACTOR I		Терапия миофасциальных болей, фиброзы, мышцы и соединительные ткани, лечение глубоких мышц (m. piriformis, m. gluteus minimus).
35 мм D-ACTOR II		Терапия миофасциальных болей, фиброзы, мышцы и соединительные ткани, мышцы спины, эластичность кожи, лечение глубоких мышц (m. piriformis, m. gluteus minimus).
V-ACTOR		Миофасциальная терапия, болезненность мышц в отсроченном периоде, мышечное лечение до и после физических нагрузок.



*Простое и быстрое обслуживание*

# Гимна ShockMaster

## Лучшая поддержка и дополнение для вашей практики

Гимна ShockMaster означает поддержку, опыт и удобство в использовании. Преимущества для врача включают:



### Знания и опыт

- Обновление программного обеспечения на основе опыта и научно-обоснованных исследований



### Расширение приложений

- Постоянно добавляются новые процедуры
- Новинка – показания для спорта
- Быстрый результат благодаря дополнительным возможностям лечения




### Больше пациентов с более быстрыми результатами

- Ударно-волновая терапия для большего количества пациентов
- Ваши пациенты быстрее вернут свой уровень активности
- Стимул для развития вашей практики



Инвестиции с максимальной отдачей

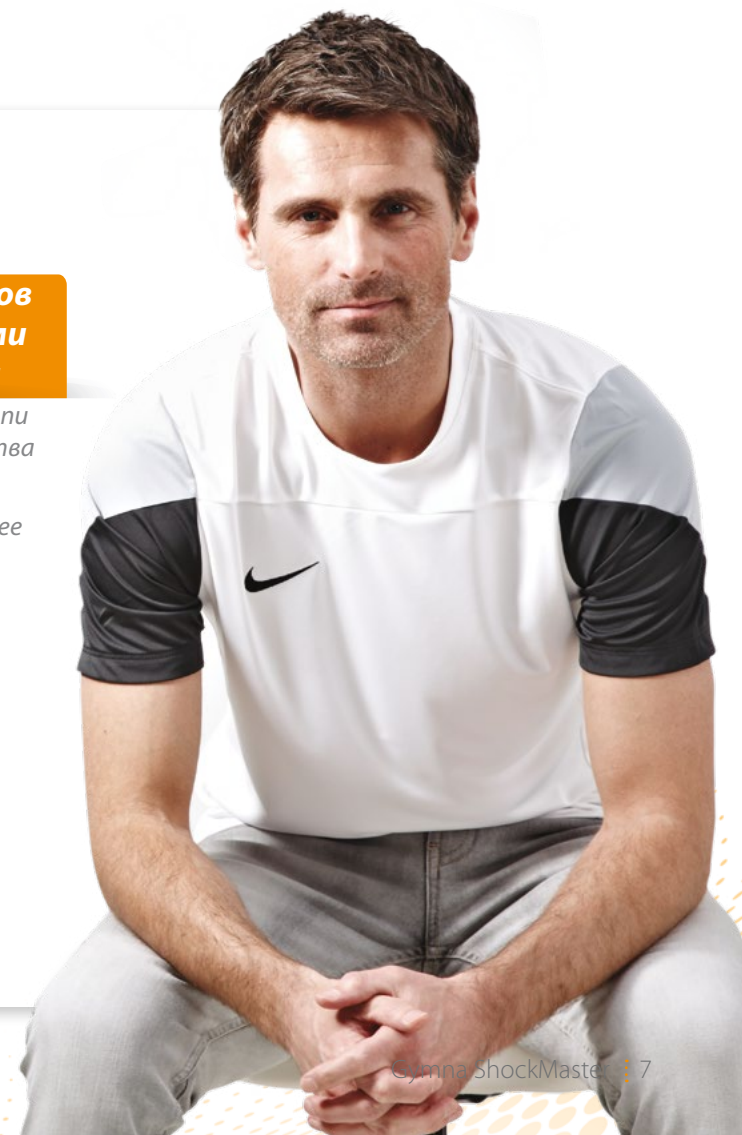

Представитель  
ГимнаUniphy в России

ООО "Гимна РУС"

Россия, 109129,  
8-я ул. Текстильщиков, 11.  
Тел.: (495) 377-76-25

E-mail: [info@gymnarus.ru](mailto:info@gymnarus.ru)  
[www.gymnarus.ru](http://www.gymnarus.ru)



Сочетание криотерапии и ударно-волновой терапии.  
Аппараты Cryoflow 1000 и ShockMaster 500

Cryotherapy



Diathermy



Shockwave Therapy



Physio Care



Treatment Tables



Electrotherapy



Active Motion



Ваш дилер

[gymna.com](http://gymna.com)

**gymna**<sup>®</sup>

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511